


Implantáty MADE in GERMANY

Katalóg produktov

- 
- ✓ Intuitívna Chirurgia
 - ✓ Platform Switching
 - ✓ Priemer 3,8 až 4,1

 InnoDentalMedical

 **Dentegris**
DENTAL IMPLANT SYSTEM

Presné Implantáty made in Germany

Zubná implantológia si vyžaduje nielen vynikajúce Produkty, ale aj optimálnu podporu, školenia a rady. Partnerstvo všetkých zúčastnených sa musí vyznačovať dôverou, férovosťou a spoľahlivosťou. Pre Dentegris a IDM spol. s.r.o to je zásada, ktorou sa riadime.



10 - ročná záruka

Vyžiadajte si náš záručný formulár na implantáty, ktoré nie sú osseointegrované alebo vylúčené implantáty. Vyplňte ho prosím celý a spolu s nevyčisteným, ale sterilne zabaleným implantátom pošlite spoločnosti IDM spol. s.r.o. Obratom dostanete nový implantát podľa vlastného výberu bezplatne.

Implantáty Dentegris sú medicínske produkty, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy bezpečnosti a pohodlia. Každý jeden implantát po vyrobení prechádza kontrolou. Potom sa sterilne zabalí a identifikuje sa číslom šarže. Vždy budete mať v rukách implantát najvyššej presnosti a čistoty.

Pri vývoji a optimalizácii našich produktov vedíme neustály dialóg s odborníkmi z chirurgie, protetiky a vedy. Všetky výrobné procesy a produkty podliehajú neustálej kontrole kvality.



Máte nejaké otázky alebo návrhy? Sme tu, aby sme vám pomohli. Tím IDM spol. s.r.o môžete kontaktovať na: info@innodentalmedical.com



Telefon:

+421 903 602 468



eMail:

info@innodentalmedical.com



Web:

www.innodentalmedical.com





www.facebook.com/InnoDentalMedical-101500554934958/

info@innodentalmedical.com

SLS-rovné, SL-kónické implantáty a implantáty do mäkkých kostí

Implantáty pre všetky indikácie a preferencie


S rovnobežnými stenami SLS-Straight, SL-Tapered v tvare koreňa a Soft-Bone implantátmi ponúka Dentegris rôzne typy implantátov pre všetky indikácie v mnohých dĺžkach a priemeroch. Kónické vnútorné spojenie zaisťuje vysokú bakteriálnu nepriepustnosť implantátov Dentegris a tiež zaisťuje rovnomerné pôsobenie okluzných síl. Zabránenie rotácii prebieha prostredníctvom klasického a osvedčeného vnútorného šesťhranu. Implantáty Dentegris majú hydrofilný, leptaný a pieskovaný povrch, ktorý je mimoriadne bezpečný. Všetky typy implantátov majú spoločnú protetickú platformu.

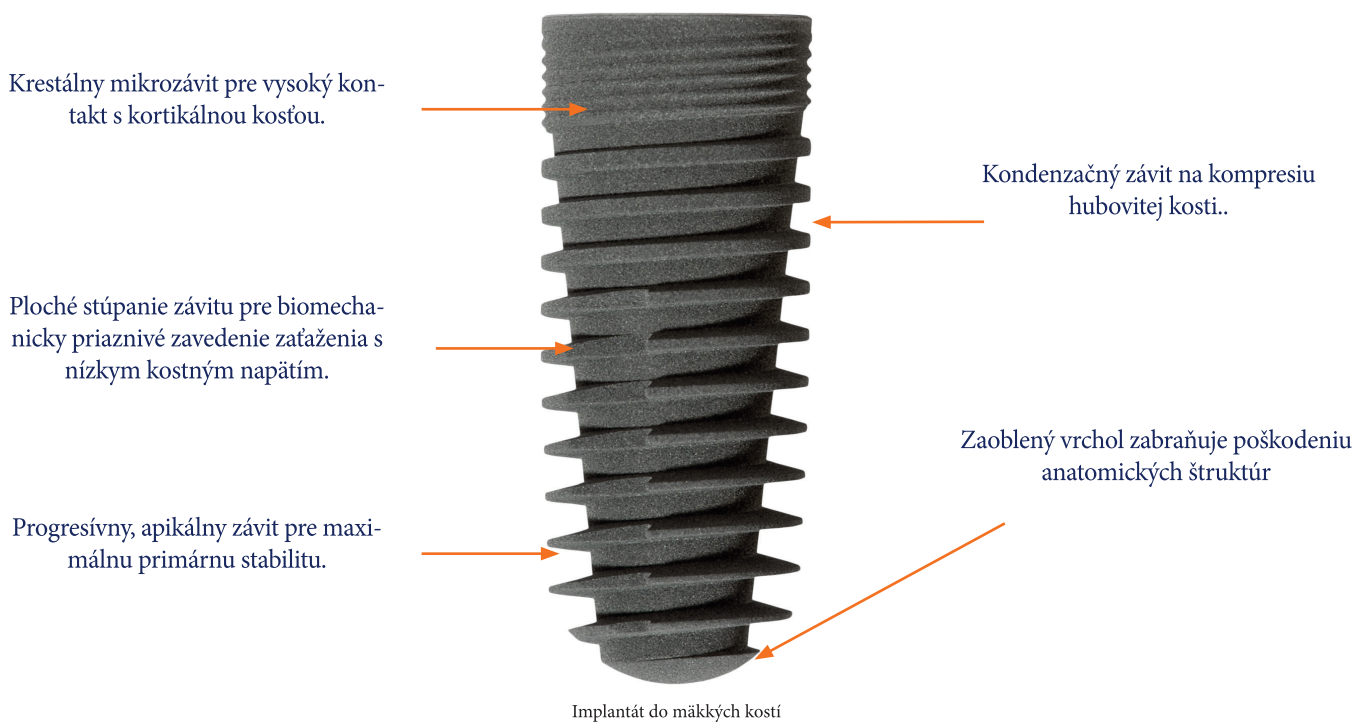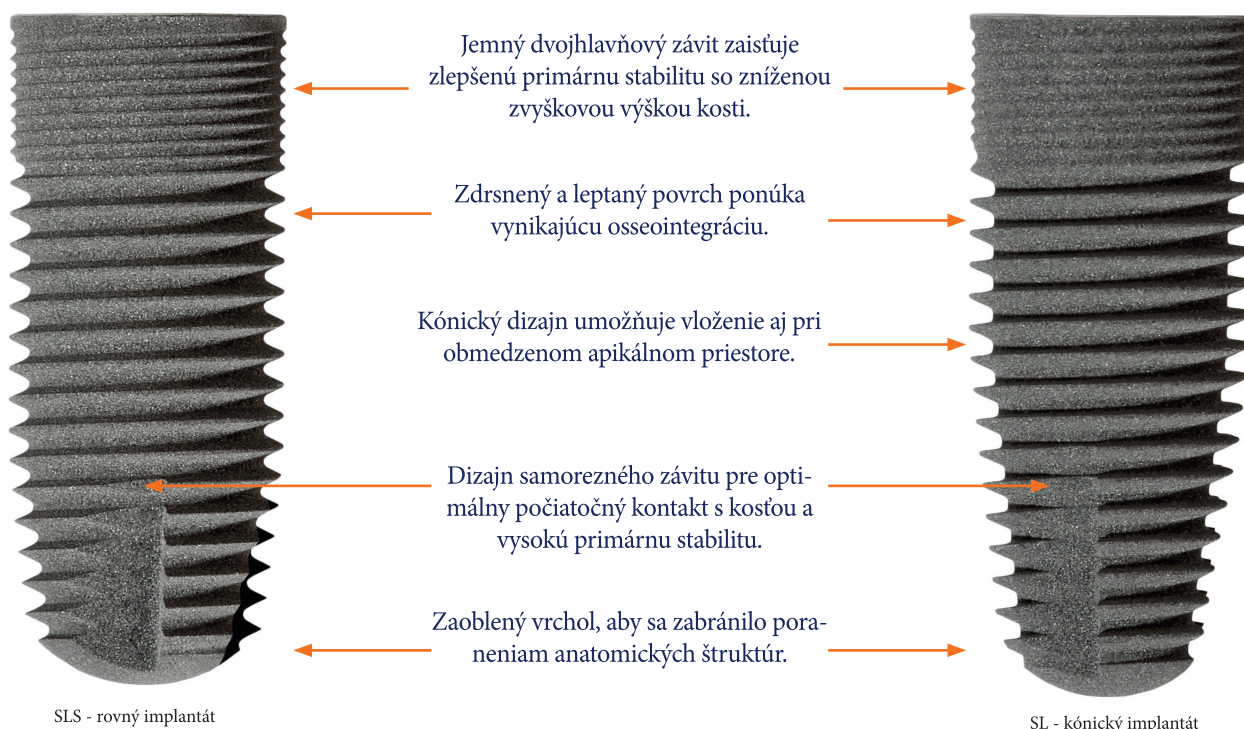

Certifikátmi potvrdená odolnosť voči baktériám

Presnosť made in Germany,


Kolonizácia dutín implantátov mikróbmami z ústnej dutiny je podstatným faktorom rozvoja periimplantitídy. Jednou z príčin je reinfekcia periimplantátového tkaniva v dôsledku bakteriálnej permeability mikroštrbiny spojenie implantát-abutment. Vysoko presné lícovanie medzi abutmentom a implantátom zaisťuje najmenšiu možnú mikroštrbinu (microgap), takže implantáty Dentegris sú certifikované ako nepriepustné pre baktérie in vitro a výrazne znižujú riziko periimplantitídy.

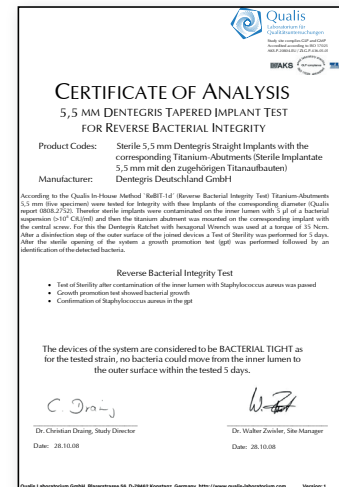

Optimalizovaný dizajn implantátu pomocou analýzy konečných prvkov


Takzvaná FE analýza zviditeľňuje zaťaženie endosseálnych implantátov a poskytuje informácie o zavedení žuvacej sily do čelustnej kosti. To má zásadný význam nielen pre „životnosť“ implantátu, ale má veľký význam aj pre dlhodobé uchovanie čelustnej kosti.

Reprezentácie analýzy konečných prvkov ukazujú, že kostné zaťaženie okolo celého implantátu je vo fyziologickom rozsahu (numerické simulácie vykonané docentom pre technológiu orálnej medicíny, Univerzita v Bonne).

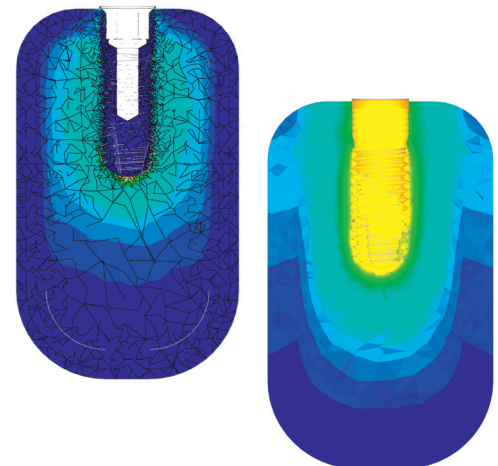

Osvedčené kuželové spojenie s vnútorným šesťhranom

Oblasť krku zaisťuje rovnomernejšie rozloženie okluzívnych síl. Hlboké šesťhranné vnútorné spojenie zaisťuje dokonalé prispôsobenie a jasne definované umiestnenie abutmentu so šiestimi možnosťami pre protetické zarovnanie.

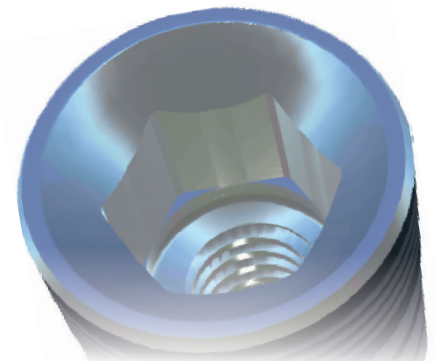

Chirurgické boxy s hĺbkovými dorazmi

Komfort a pohodlná práca

Chirurgické boxy Dentegris uľahčujú implantáciu: Grafická príprava a farebne odlišené nástroje sú jasné a zabezpečujú dobrý prehľad počas operácie.



Straight Safety Stop Line Master Pro



Naše ordinačné boxy pre bezpečnostné dorazové vrtáčky ponúkame v rovnnej a kónickej verzii. Priame vrtáčky sú vhodné na prípravu lôžka implantátu pre implantáty SLS-Straight.

Kuželové vrtáčky sa používajú pre SL kuželovité a implantáty do mäkkých kostí v tvare koreňa. Náš odborný predajca vám rád poradí, ktorý chirurgický box vyhovuje vašim individuálnym potrebám.

Vyberte si medzi „Master“ (vrátane nástrojov pre priemer implantátu 5,5 mm) a „Pro“ (vrátane vrtáčka s dĺžkou 14,5 mm).


SLS-priame a SL-kónické implantáty

Priame implantáty SLS.

S priamym implantátom SLS spája Dentegris to najlepšie z popredných implantačných systémov: celosvetovo úspešný dizajn s paralelnými stenami a osvedčené vnútorné spojenie. V oblasti krčka má implantát dvojité jemný závit s vyvýšeným povrchom. Tým sa zvyšuje kontakt medzi kosťou a povrchom implantátu.


Implantáty SL-Tapered

Implantát SL-Tapered svojim kuželovitým tvarom pripomína prirodzený koreň zuba. Vďaka tomu je obzvlášť vhodný na zavedenie bezprostredne po extrakcii alebo na dosiahnutie esteticky priaznivejšieho postavenia implantátu. Implantát má v oblasti krku dvojité jemný závit, ktorý zaisťuje zlepšenú primárnu stabilitu so zníženou zvyškovou výškou kosti. V spojení s vyvýšeným povrchom je maximálny kontakt medzi povrchom implantátu a kosťou.



	3.3	3.8	4.1	4.5	5.5	
SLS-rovné						
Dĺžka	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
8,0 mm	-	38008-SLS	41008-SLS	45008-SLS	55008-SLS	159,00 E
10,0 mm	33010-ST	38010-SLS	41010-SLS	45010-SLS	55010-SLS	159,00 E
11,5 mm	33011-ST	38011-SLS	41011-SLS	45011-SLS	55011-SLS	159,00 E
13,0 mm	33013-ST	38013-SLS	41013-SLS	45013-SLS	55013-SLS	159,00 E
14,5 mm	33014-ST	38014-SLS	41014-SLS	45014-SLS	-	159,00 E

Všetky implantáty sú dodávané s farebne označenou krycou skrutkou. Potrebny skrutkovač 1,25 mm / 0,049 „ Imbus (pozri stranu 20).



	3.3	3.8	4.1	4.5	5.5	
SL-Kónický						
Dĺžka	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
8,0 mm	-	38008-SL	41008-SL	45008-SL	55008-SL	159,00 E
10,0 mm	33010-ST	38010-SL	41010-SL	45010-SL	55010-SL	159,00 E
11,5 mm	33011-ST	38011-SL	41011-SL	45011-SL	55011-SL	159,00 E
13,0 mm	33013-ST	38013-SL	41013-SL	45013-SL	55013-SL	159,00 E
14,5 mm	33014-ST	38014-SL	41014-SL	45014-SL	-	159,00 E

Všetky implantáty sú dodávané s farebne označenou krycou skrutkou. Potrebny skrutkovač 1,25 mm / 0,049 „ Imbus (pozri stranu 20).

Implantáty S&T - Implantát Ø 3,3 mm

Implantát S&T je implantát so zmenšeným priemerom s kuželovitým univerzálnym tvarom a je určený na použitie pri zníženej dostupnosti kosti alebo v obmedzených priestoroch. Klinicky sa používa iba v oblasti horných, bočných alebo dolných rezákov.

Implantát do mäkkých kostí



Implantát Soft-Bone bol špeciálne vyvinutý pre použitie pri štruktúrne nepriaznivých kostných stavoch, ale dá sa použiť aj univerzálne. Vynikajúca primárna stabilita je dosiahnutá vďaka progresívnemu dizajnu závitů.

3.8

4.1

4.5

Dĺžka	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
8,0 mm	38008-SB	41008-SB	45008-SB	159,00 E
10,0 mm	38010-SB	41010-SB	45010-SB	159,00 E
11,5 mm	38011-SB	41011-SB	45011-SB	159,00 E
13,0 mm	38013-SB	41013-SB	45013-SB	159,00 E
14,5 mm	38014-SB	41014-SB	45014-SB	159,00 E

Všetky implantáty sú dodávané s farebne označenou krycou skrutkou.

Potrebný skrutkovač 1,25 mm / 0,049 „ Imbus (pozri stranu 20).

Indikácia

OK	3.3	-	(+)	-	-	-	-	-
	3.8	+	++	+	+	+	(+)	(+)
	4.1	++	-	++	++	++	+	+
	4.5	++	-	++	++	++	++	++
	5.5	++	-	++	++	++	++	++
UK	Zub	1	2	3	4	5	6	7
	3.3	(+)	(+)	-	-	-	-	-
	3.8	++	++	++	+	+	(+)	(+)
	4.1	-	-	++	++	++	+	+
	4.5	-	-	++	++	++	++	++
	5.5	-	-	++	++	++	++	++

- = Nevhodné

(+) = Vhodné len v spojení so zubami alebo inými implantátmi

+ = Vhodné, najlepšie v spojení so zubami alebo inými implantátmi

++ = Vhodné pre korunky

Mini implantáty s guľovou hlavou

Implantát miniguľovej hlavice je cenovo výhodné, implantologické riešenie pre interforaminálnu oblasť a za optimálnych podmienok je možné ho implantovať minimálne invazívnym spôsobom bez vytvorenia chlopne. Spoločnosť Dentegris odporúča použiť aspoň štyri miniimplantáty s guľovou hlavou na umiestnenie úplnej mandibulárnej protézy.



Mini implantát s guľovou hlavou

2.7

Mini Implantát s guľovou hlavou



Dĺžka	Art.-Nr.	Cena/Kus
10,0 mm	2710-M	79,50 E
11,5 mm	2711-M	79,50 E
13,0 mm	2713-M	79,50 E

Príslušenstvo / Nástroje

Príslušenstvo / Nástroje	Art.-Nr.	Cena/Kus
2 mm špirálový vrták pre mini implantát guľovej hlavy	SB200	69,90 E
Zavádzač pre mini implantát guľovej hlavy	SV270	69,90 E
Vkladací nástroj pre guľovú hlavu a DAAS	INS270-KUG	69,90 E




Matrice a príslušenstvo nájdete na strane 11 v časti matrice / príslušenstvo

Gingivaformer


		3.3	3.8 4.1	4.5	5.5		
Gingivaformer Kónický		Gingivaformer, kónický					
	Dĺžka	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus	
	2,0 mm	330GFA02	3841GFA02	450GFA02	550GFA02	29,90 E	
	4,0 mm	330GFA04	3841GFA04	450GFA04	550GFA04	29,90 E	
	6,0 mm	330GFA06	3841GFA06	450GFA06	550GFA06	29,90 E	
Gingivaformer Rovný		Gingivaformer, rovný					
	Dĺžka	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus	
	2,0 mm	330GFG02	3841GFG02	450GFG02	550GFG02	29,90 E	
	4,0 mm	330GFG04	3841GFG04	450GFG04	550GFG04	29,90 E	
	6,0 mm	330GFG06	3841GFG06	450GFG06	550GFG06	29,90 E	

Potrebný skrutkovač 1,25 mm / 0,049 „Imbusový kľúč (pozri stranu 20).

Odtlačacia nadstavba pre otvorenú/zatvorenú techniku

		3.3	3.8 4.1	4.5	5.5		
Odtlačacia nadstavba otvorená 9 mm		Otvorená technika					
	Dĺžka	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus	
	9,0 mm	330AO	3841AO	450AO	550AO	44,90 E	
	13,0 mm	330AOL	3841AOL	450AOL	550AOL	44,90 E	
Odtlačacia nadstavba otvorená dĺžka 13 mm		Zatvorená technika					
	Dĺžka	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus	
	11,0 mm	330AG	3841AG	450AG	550AG	44,90 E	
Odtlačacia nadstavba zatvorená		Potrebný skrutkovač 1,25 mm / 0,049 „Imbusový kľúč (pozri stranu 20). Pre otvorené odtlačkové tyče s výškou 9,0 mm sú k dispozícii skrutky dlhšie o 5 mm (č. položky 34SA5-4 alebo 55SA5-4, každá v balení 4 ks, cena: 49,90 E).					
	Dĺžka	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus	
	12,0 mm	330MA	3841MA	450MA	550MA	25,90 E	

Laboratórny analóg

		3.3	3.8 4.1	4.5	5.5		
Laboratórny analóg		Laboratórny analóg					
	Dĺžka	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus	
	12,0 mm	330MA	3841MA	450MA	550MA	25,90 E	

Odtlačok AGP vrátane odtlačkového uzáveru a skrutky

Vysoko presný odtlačkový uzáver zreteľne zapadne na miesto, zostane bezpečne v odtlačkovom materiáli a zabráni chybám pri prenose. Abutment má výšku ramena 5 mm alebo 7,5 mm, a preto je bezpečné ho použiť aj pri hrubšej gígne.

Odtlačok AGP



Odtlačok AGP dlhý



3.3

3.8
4.1

4.5

5.5

Odtlačok AGP vrátane odtlačkového uzáveru a skrutky

Výška	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
5,0 mm	330AGP	3841AGP	450AGP	550AGP	64,90 E
7,5 mm	330AGPL	3841AGPL	450AGPL	550AGPL	64,90 E

Odtlačkový uzáver

pre AGP	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
Odtlačok	330AK	3841AK	450AK	550AK	19,90 E

Potrebný skrutkovač 1,25 mm / 0,049 „Imbusový kľúč (pozri stranu 20). Pre odtlačkové tyče AGP s výškou ramien 5,0 mm a 7,5 mm sú skrutky dostupné aj samostatne (č. položky 34AS-4 alebo 55AS-4, každá v balení po 4 ks, cena: 49,90 E).

Titánové nadstavby

Titánové nadstavby/abutmenty sú obzvlášť vhodné pre cementovateľné korunkové/mostíkové náhrady a sú dostupné v rovnej a uhlovej forme 15° alebo 25°. Sú dodávané s upevňovacou skrutkou

3.3

3.8
4.1

4.5

5.5

Titánová nadstavba



Titánová nadstavba

Výška	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
bez	330TA0	3841TA0	450TA0	550TA0	89,90 E
1,5 mm	330TA1	3841TA1	450TA1	550TA1	89,90 E
3,0 mm	330TA3	3841TA3	450TA3	550TA3	89,90 E

Titánová nadstavba 15°



Titánová nadstavba 15°

Výška	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
1,5 mm	330TA115	3841TA115	450TA115	550TA115	89,90 E
3,0 mm	330TA315	3841TA315	450TA315	-	89,90 E

Titánová nadstavba 25°





Titánová nadstavba 25°

Výška	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
1,5 mm	330TA125	3841TA125	450TA125	-	89,90 E
3,0 mm	330TA325	3841TA325	450TA325	-	89,90 E

Potrebný skrutkovač 1,25 mm / 0,049 „Imbusový kľúč (pozri stranu 20). Požadovaný krútiaci moment pre integráciu: 35 Ncm. Stredová skrutka by mala byť dotiahnutá príslušným krútiacim momentom po cca 10 minútach. Na spracovanie v laboratóriu odporúčame samostatne dostupnú laboratórnu skrutku (č. položky Lab18-4 v balení 4 ks, cena: 29,90 E). Ako implantátový cement odporúčame ImProv™ (pozri stranu 22).

Liate nadstavby | korunky a mostíky



Nadstavby s odliatou základňou a bezvýchovými, prispôsobiteľnými plastovými valcami. Pre skrutkované alebo cemenované korunky, individuálne navrhnuté piliere pre mostíky a výplne tyčí, ako aj pre výrobu primárnych častí technikou dvojitej korunky. Dodávka vrátane upevňovacej skrutky.

	3.3	3.8 4.1	4.5	5.5	
 Zlatá plastová konštrukcia s (biela) a bez (čierna) poistkou proti otáčaniu					
Zlato-plastová štruktúra (UCLA) vhodná pre liate zliatiny s vysokým obsahom zlata					
Aretácia	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
s	330UCLAmH	3841UCLAmH	450UCLAmH	550UCLAmH	129,00 E
bez	330UCLAoH	3841UCLAoH	450UCLAoH	-	129,00 E
 Platino-irídiová podpera s plastovou manžetou. S (čierna) a bez (biela) poistkou proti otáčaniu					
Platino-irídiová štruktúra, ako je UCLA; vhodné aj pre vysokotavitelné zliatiny / vzácne kovy					
Aretácia	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
s	330PTIRmH	3841PTIRmH	450PTIRmH	550PTIRmH	129,00 E
bez	330PTIRoH	3841PTIRoH	450PTIRoH	-	129,00 E

Potrebný skrutkovač 1,25 mm / 0,049 „Imbusový kľúč (pozri stranu 20). Požadovaný krútiaci moment pre integráciu: 35 Ncm. Stredová skrutka by mala byť dotiahnutá príslušným krútiacim momentom po cca 10 minútach. Na spracovanie v laboratóriu odporúčame samostatne dostupnú laboratórnu skrutku (č. položky Lab18-4 v balení 4 ks, cena: 29,90 E).

Dočasné titánové nadstavby | Plastový valec

Na dočasné obnovenie implantátov sú k dispozícii plastové valce a titánové valce, ktoré je možné skrútiť s ochranou proti otáčaniu alebo bez nej. Dodávka vrátane upevňovacej skrutky.

	3.3	3.8 4.1	4.5	5.5	
 Provizórna titánová nadstavba					
Aretácia	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
s	330ProvMH	3841ProvMH	450ProvMH	-	49,90 E
bez	330ProvOH	3841ProvOH	450ProvOH	-	49,90 E
 Plastový valec					
Aretácia	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
s	-	3841KUNmH	450KUNmH	550KUNmH	49,90 E

1,25 mm / 0,049 „Imbusový skrutkovač (pozri stranu 20). Požadovaný krútiaci moment pre integráciu: 35 Ncm. Stredová skrutka by mala byť dotiahnutá príslušným krútiacim momentom po cca 10 minútach. Na spracovanie v laboratóriu odporúčame samostatne dostupnú laboratórnu skrutku (č. položky Lab18-4 v balení 4 ks, cena: 29,90 E). Ako implantátový cement odporúčame ImProv™ (pozri stranu 22).

Guľové nadstavby

Opora s guľovou hlavou je klasickým spôsobom pripevnenia úplných zubných protéz k implantátom a môže byť voliteľne vybavená štandardnými maticami alebo maticami TIMA (Unor, Švajčiarsko). Sila odtrhnutia štandardnej matrice je riadená zádržnými krúžkami rôznych stupňov tvrdosti. Súčasťou dodávky je jeden mäkký a jeden tvrdý poistný krúžok. Uzavretá matrica TIMA vyrobená z titánu získava svoju pridrznú silu prostredníctvom výmennej prstencovej pružiny z vysoko pevnej špeciálnej pružinovej ocele, ktorú je možné vymeniť jednoduchým naskrutkovaním matrice.

Výška	3.3	3.8 4.1	4.5	Cena/Kus
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
1,0 mm	330KUG01	3841KUG01	450KUG01	69,90 E
2,0 mm	330KUG02	3841KUG02	450KUG02	69,90 E
3,0 mm	330KUG03	3841KUG03	450KUG03	69,90 E
4,0 mm	330KUG04	3841KUG04	450KUG04	69,90 E



Matricové a rotačné prvky prosím objednajte samostatne! Potrebný nástroj na vloženie guľovej hlavy (pozri nižšie). Potrebný krútiaci moment pre integráciu: 30- max.35Ncm.



Matrice, rotačné prvky, doplnky

Popis:	Art.-Nr.	Cena/Kus
Matrica vrátane 2 rotačných prvkov (červené a priehľadné)	POR270	29,95 E
Rotačné prvky tvrdé, čierne (4 kusy)	POR271	26,00 E
Rotačné prvky stredne tvrdé, priehľadné (4 kusy)	POR272	26,00 E
Rotačné prvky mäkké, červené (4 kusy)	POR273	26,00 E
Laboratórny analóg	270MA	25,90 E
Modelovo analógový vkladací nástroj pre guľovú hlavu a DAAS	INS270-KUG	69,90 E

TIMA - kotvenie



TIMA kotvenie

Popis:	Art.-Nr.	Cena
TIMA matrica pre guľovú hlavu vrátane krúžkovej pružiny (cca 800g)	POR274	39,95 E
TIMA krúžková pružina štandardná pre guľovú hlavu	POR275	6,50 E
TIMA activator	2022631	69,90 E

Systém LoPat | Zásobovanie zubnou protézou

LoPat je pohodlné riešenie pre zubnú protézu. LoPat Attachment System * je určený na pripevnenie slizničných protéz k minimálne dvom implantátom a vďaka veľmi nízkej celkovej výške je vhodný aj na zabudovanie do existujúcich úplných náhrad. Opýtajte sa na naše atraktívne ponuky balíkov.

Výška	LoPat-nadstavba				Cena/Kus
	3.3	3.8 4.1	4.5	5.5	
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
1,0 mm	330PAT01	3841PAT01	450PAT01	550PAT01	99,00 E
2,0 mm	330PAT02	3841PAT02	450PAT02	550PAT02	99,00 E
3,0 mm	330PAT03	3841PAT03	450PAT03	550PAT03	99,00 E
4,0 mm	330PAT04	3841PAT04	450PAT04	550PAT04	99,00 E
5,0 mm	330PAT05	3841PAT05	450PAT05	550PAT05	99,00 E

Na spracovanie priamych abutmentov LoPat potrebujete nástroj LoPat (pozri nižšie). Potrebný krútiaci moment pre integráciu: 30 Ncm.

LoPat-nadstavba, uhol 15°, vrátane skrutky

Výška	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
2,0 mm	-	3841PAT215	450PAT215	-	99,00 E
3,0 mm	-	3841PAT315	450PAT315	-	99,00 E
4,0 mm	-	3841PAT415	450PAT415	-	99,00 E

Potrebný skrutkovač 1,25 mm / 0,049 „Imbusový kľúč (pozri stranu 20). Požadovaný krútiaci moment pre integráciu: 35 Ncm. Stredová skrutka by mala byť dotiahnutá príslušným krútiacim momentom po cca 10 minútach. Na spracovanie v laboratóriu odporúčame samostatne dostupnú laboratórnu skrutku (č. položky Lab18-4 v balení 4 ks, cena: 29,90 E).

LoPat-konštrukcia

Popis:	Art.-Nr.	Cena
LoPat-Steg, Gewinde M 2	LOPAT-STEG	99,90 E

LoPat-komponenty

Popis:	Art.-Nr.	Cena
LoPat-Tool	LOPAT-TOOL	69,90 E
LoMat matrica	LOMAT-1	34,95 E
Rotačné vložky 0° -10°	LOMAT-1A	34,95 E
LoPat odtlačkové kolíky (balenie 4ks)	LOPAT-AG	69,90 E
LoPat laboratórne analógy (balenie 4ks)	LOPAT-MA	69,90 E
Rotačné vložky na normálnu retenciu (0° -10°), priehľadné (balenie 4 ks)	LOMAT-RET1	25,00 E
Rotačné vložky na ľahkú retenciu (0° -10°), ružové (balenie 4 ks)	LOMAT-RET2	25,00 E
Rotačné vložky pre extra ľahkú retenciu (0° -10°), modré (balenie 4 ks)	LOMAT-RET3	25,00 E
Rotačné vložky na kompenzáciu divergencie (do 20°) a normálne zadržiavanie, zelené (balenie 4 ks)	LOMAT-RET4	25,00 E
Rotačné vložky na kompenzáciu divergencie (do 20°) a ľahkú retenciu, oranžové (balenie 4 ks)	LOMAT-RET5	25,00 E
Rotačné vložky na kompenzáciu divergencie (do 20°) a extra ľahkú retenciu, červené (balenie 4 ks)	LOMAT-RET6	25,00 E
Pomocná časť (dištančný krúžok) na blokovanie (balenie 4 ks)	LOMATHA-4	25,00 E
Obrábacej vložka (Výrobná vložka), čierna (balenie 4 ks)	LOMATPH-4	25,00 E
Račňová vložka pre LoPat	INS029	69,90 E


Rotačné vložky sú vhodné pre divergenciu 0° - 10°. Od 10° divergencie použite prosím rotačné vložky na predĺženú uhľenie. Rotačné vložky na predĺženú anguláciu nie sú vhodné pre implantáty s priemerom 3,3 mm. * Abutmenty LoPat sú kompatibilné s komponentmi Locator™ od Zest Anchors, Inc., USA

CM LOC[®] matrice

Modulárny matricový systém umožňuje obnovu existujúcich pilierov LoPat alebo Locator[®].

Farebne označené rotačné vložky vyrobené z vysokovýkonného polyméru Pekkton[®] sú k dispozícii pre puzdro z titánovej matrice v štyroch silových úrovniach: extra ľahké, ľahké, stredné a silné.

Matrica

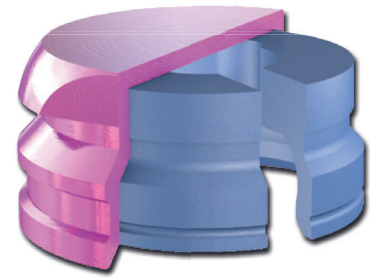


Pekkton[®] Retentionseinsätze




extra ľahká
ca. 500g



ľahká
ca. 900g

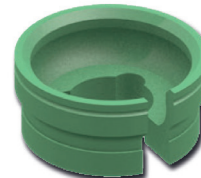





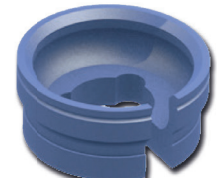




stredne pevná
ca. 1.900g

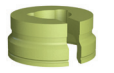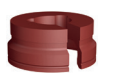

pevná
ca. 2.600g

CM LOC- komponenty

	Popis:	Art.-Nr.	Cena
	CM LOC [®] Základná sada titán (balenie 2 ks)	05003001	86,00 E
	CM LOC [®] Základná sada titán (balenie 2 ks)	05001995	69,00 E
	Rotančná vložka CM LOC [®] , extra ľahká, žltá (balenie po 4 ks)	05001314	48,50 E
	Rotančná vložka CM LOC [®] , ľahká, červená (balenie 4 ks)	05001315	48,50 E
	Rotančná vložka CM LOC [®] , stredne pevná, zelená (balenie po 4 ks)	05001316	48,50 E
	Rotančná vložka CM LOC [®] , pevná, modrá (balenie 4 ks)	05001317	48,50 E
	Procesná vložka CM LOC [®] (balenie 4 ks)	05001328	48,50 E
	Multi-Tool (Vložit/Odstrániť Pekkton Ret.inserts)	07000205	85,50 E
	CM LOC [®] blokovacia pomôcka na inštaláciu matrice (balenie 4 ks)	07000202	25,00 E

CM LOC[®] a Pekkton[®] sú registrované ochranné známky spoločnosti FA Cendres+Métaux SA. Pekkton[®] je založený na OXPEKK[®] od OPM, Oxford Performance Materials, Inc., USA. Všetky práva vyhradené.vorbehalten.

CAD / CAM technológia estetické nastavby z oxidu zirkoničitého | lepiace základne a skenovacie telesá

			3.3	3.8 4.1	4.5	5.5		
Zirkónová nadstavba pre Cer Tis								
			Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus	
Typ B (bočný zub)	Typ C (predný zub)	Typ D (15°)	CerZirB	CerZirB	CerZirB	-	109,00 E	
			CerZirC	CerZirC	CerZirC	-	109,00 E	
			CerZirD	CerZirD	CerZirD	-	109,00 E	

			Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus	
Titánová nadstavba								
			Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus	
CerTis			330CerTis	3841CerTis	450CerTis	550CerTis	79,90 E	
CerTis, lang			330CerTis-L	3841CerTis-L	450CerTis-L	550CerTis-L	79,90 E	
CerTis, ohne Hex			330CerTisOH	3841CerTisOH	450CerTisOH	550CerTisOH	79,90 E	
SirTis			330SirTis	3841SirTis	450SirTis	-	79,90 E	

Scanbody inklusive Halteschraube



CerScan

	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
pre CerTis	330CerScan	3841CerScan	450CerScan	550CerScan	35,00 E

Skenovacie teliesko Dentsply Sirona veľkosti S je potrebné pre 330SirTis a 3841SirTis a veľkosť L pre snímacie teliesko 450SirTis. Skenovacie teliesko Dentsply Sirona je dostupné u špecializovaných predajcov zubných lekárov (napr. GERL-Dental).

1,25 mm / 0,049 "Imbusový skrutkovač (pozri stranu 20). Požadovaný krútiaci moment pre integráciu: 35 Ncm. Stredová skrutka by mala byť dotiahnutá príslušným krútiacim momentom po cca 10 minútach. Na spracovanie v laboratóriu odporúčame samostatne dostupnú laboratórnu skrutku (č. položky Lab18-4 v balení 4 ks, cena: 29,90 E).

		3.3	3.8 4.1	4.5	5.5	Cena/Kus
Upevňovacie skrutky (balenie po 4ks)						
	pre:	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
	Titánové abutmenty, odliate abutmenty	ZS18-4	ZS18-4	ZS18-4	ZS03-4	39,90 E
	Lopat abutmenty, uhlové adhézne	-	ZS18-4	ZS18-4	-	39,90 E
	Základné a skenovacie telesá	ZS18-4	ZS18-4	ZS18-4	ScanZS03	39,90 E
	DAAS abutmenty	-	ZS18-4	ZS18-4	-	39,90 E
	Odtlačkové kolíky	34SA-4	34SA-4	34SA-4	55SA-4	49,90 E
	Odtlačkové kolíky, dlhé	34SA5-4	34SA5-4	34SA5-4	55SA5-4	49,90 E
	Odtlačok AGP / AGPL	34AS-4	34AS-4	34AS-4	55AS-4	49,90 E
	DAAS titánový / plastový valec (M1.4)	-	DAASZS14-4	DAASZS14-4	-	49,90 E
	DAAS odtlačok	-	DAASSA-4	DAASSA-4	-	49,90 E
	Laboratórne skrutky	LAB18-4	LAB18-4	LAB18-4	-	29,90 E


inLab/Cerec® sú registrované ochranné známky spoločnosti Dentsply Sirona. Všetky práva vyhradené.

DAAS | Dentegris Angulated Abutment System

Inovatívne systémové riešenie pre bezzubú čeľusť DAAS je protetické riešenie so skrutkovými mostíkmi na štyroch (dolných) alebo šiestich (horných) implantátoch pre bezzubú čeľusť. DAAS zodpovedá želaniu mnohých pacientov po rýchlej a bezproblémovej rekonštrukcii s fixnými zubnými protézami, aby sa predišlo bezzubosti.

Výhody DAAS:

- Skrátený čas ošetrovania / termíny ošetrovania
- Znížené chirurgické úsilie
- Štandardizovaný chirurgický protokol
- Predvídateľné náklady na ošetrovanie
- Žiadne problematické podnebie

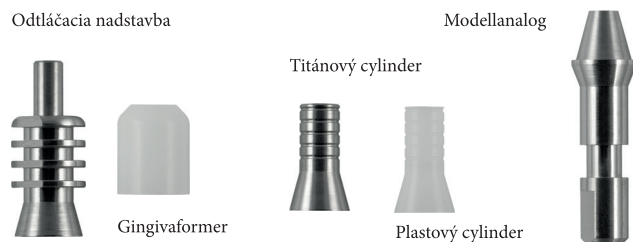3.8
4.1

4.5

DAAS nadstavba rovná

Výška	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
2,0 mm	3841DAAS20	450DAAS20	89,90 E
4,0 mm	3841DAAS40	450DAAS40	89,90 E

DAAS nadstavba 18°, vrátane skrutky

Výška	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
2,0 mm	3841DAAS218	450DAAS218	149,90 E
4,0 mm	3841DAAS418	450DAAS418	149,90 E

DAAS nadstavba 35°, vrátane skrutky

Výška	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
4,0 mm	3841DAAS435	450DAAS435	149,90 E

DAAS systém

Popis:	Art.-Nr.	Cena/Kus
DAAS laboratórny analóg	DAASMA	29,90 E
DAAS Gingivaformer, vrátane skrutky	DAASGF	29,90 E
DAAS odtlačkový kolík otvorený, vrátane skrutky	DAASAO	49,90 E
DAAS titánový valec, vrátane skrutky	DAASTI	49,90 E
DAAS plastový valec, vrátane skrutky	DAASKUN	49,90 E
DAAS skrutkový odtlačovací kolík otvorený (balenie 4 ks)	DAASSA-4	49,90 E
DAAS skrutka M1.4 (balenie 4 ks)	DAASZS14-4	49,90 E
Zavádzací nástroj pre miniimplantáty, abutmenty s guľovou hlavou a DAAS	INS270-KUG	69,90 E

Na integráciu rovných abutmentov DAAS (INS270-KUG) je potrebný zavádzací nástroj pre miniimplantáty, abutmenty s guľovou hlavou a DAAS. Skrutkovač pre uhlové podpery DAAS 1,25 mm / 0,049 „Inbusový kľúč“ (pozri stranu 20). Požadovaný krútiaci moment pre integráciu: 35 Ncm.

Požadovaný krútiaci moment pri integrácii DAASTI / DAASKUN (DAASZS14): maximálne 25 Ncm. Stredová skrutka by mala byť dotiahnutá príslušným krútiacim momentom po cca 10 minútach. Pre spracovanie v laboratóriu odporúčame samostatne dostupnú laboratórnu skrutku (obj. č. Lab18-4) v balení 4 ks, cena: 29,90 E). Ako implantátový cement odporúčame ImProv™ (pozri stranu 22).

Štandardná línia - SLS-Straight

Univerzálne vrtáky pre rovné implantáty

Farebne označené univerzálne vrtáky Straight sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele najvyššej presnosti a kvality, vyrobené nemeckou jednotkou na trhu. Osvedčený špirálovitý tvar poskytuje veľmi dobrý rezný výkon s dlhou životnosťou nástroja a zaisťuje efektívny úber materiálu s bezproblémovým odvodom triesok. Matný dizajn zabraňuje odrazom svetla a vody a umožňuje prácu bez oslnenia. Dobre viditeľné laserové značenie v tvare tyče zaisťuje dobrú orientáciu počas implantácie. Plochý 0,5 mm hrot vrtáka, ktorý zostáva rovnaký pre všetky priemery vrtákov, robí implantáciu ešte jednoduchšou a predvídateľnejšou. Závitníky sú vhodné pre strojové aj ručné použitie.



Hĺbka zahĺbenia pre kosti D1-D3 Knochen = A
Hĺbka zahĺbenia pre kosti = B

Hrot vrtáka o 0,5 mm dlhší ako laserové označenie.

2.0

3.3

3.8

4.1

4.5

5.5

Priamy/rovný Systém

Produkt	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
Pilotný vrták (Pilot Drill)	SB200	-	-	-	-	69,90 E
Zavádzač (Pilot/Counter)	SV270	SV330	SV380	SV410	SV450	69,90 E
Hĺbkový vrták (Drills)	-	SB330	SB380	SB410	SB450	69,90 E
Závitník (Tap)	-	SG330	SG380	SG410	SG450	69,90 E

Bezpečnostný vrták s dorazom - SLS-Straight

Bezpečnostné vrtáky s dorazom

Pri vývoji bezpečnostných vrtákov s dorazom sme sa sústredili na vysoký komfort a maximálnu bezpečnosť použitia. Novo navrhnuté hĺbkové dorazy poskytujú odborníkovi plnú kontrolu nad hĺbkou vrtania za každých okolností, dokonca aj v rizikových oblastiach, a zaisťujú prácu bez stresu. Ručným odstránením úzkych dorazov je možná korekcia hĺbky až 1,5 mm. Na rozdiel od univerzálnych vrtákov s laserovým značením má každá dĺžka implantátu vlastný vrták v príslušnom priemere.



	2.0	3.3	3.8	4.1	4.5	5.5	
Zavádzač (Pilot/Counter)							
Dĺžka	Art.-Nr. SV270	Art.-Nr. SV330	Art.-Nr. SV380	Art.-Nr. SV410	Art.-Nr. SV450	Art.-Nr. SV550	Cena/Kus 69,90 E
Bezpečnostný vrták s dorazom (Drills)							
10,0 mm	SB2010	SB33010	SB38010	SB41010	SB45010	SB55010	79,90 E
11,5 mm	SB2011	SB33011	SB38011	SB41011	SB45011	SB55011	79,90 E
13,0 mm	SB2013	SB33013	SB38013	SB41013	SB45013	SB55013	79,90 E
14,5 mm	SB2014	SB33014	SB38014	SB41014	SB45014	-	79,90 E
Príklep (Tap)							
	-	SG330	SG380	SG410	SG450	SG550	69,90 E
8 mm hĺbkové dorazy (použiteľné s 10 mm vrtákom)							
	STOP200.8	STOP330.8	STOP380.8	STOP410.8	STOP450.8	STOP550.8	10,00 E

Štandardná čiarová vrtačka - SL-Tapered / Soft-Bone

Univerzálne vrtáky pre kuželové implantáty

Chirurgické vrtáky pre kuželové implantáty Dentegris majú rovnaké kvalitatívne vlastnosti ako rovné vrtáky. Viaczubové vrtáky optimálne pripravujú vrtný tunel na prijatie zúžených implantátov v tvare koreňa a umožňujú vloženie implantátu s optimalizovanou primárnou stabilitou. Závitníky sú vhodné pre strojové aj ručné použitie.

Zavádzač implantátu (Pilot/Counter)



Hĺbka zahĺbenia pre kosti D1-D3 = A
 Hĺbka zahĺbenia pre kosti D4 = B

Pilotné hĺbkové vrtáky



Hrot vrtáka o 0,5 mm dlhší ako laserové označenie.

Rezačka závitov (Tap)



Kuželový systém

Produkt	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
Záhľbník pilotného vrtáka (Pilot Drill)	SB200	-	-	-	-	-	69,90 E
Zavádzač implantátu (Pilot/Counter)	SV270	SV330	SV380	SV410	TV450	TV550	69,90 E
Hĺbkový vrták	-	SB330	TB380	TB410	TB450	TB550	69,90 E
Závitník (Tap)	-	SG330	TG380	TG410	TG450	TG550	69,90 E

Bezpečnostný vrták s dorazom - SL-Tapered / Soft-Bone


Bezpečnostné vrtáky s dorazom pre kuželovité implantáty

Pri vývoji bezpečnostných vrtákov s dorazom sme sa sústredili na vysokú úroveň pohodlia a maximálna bezpečnosť aplikácie. Novo navrhnuté hĺbkové dorazy poskytujú odborníkovi plnú kontrolu nad hĺbkou vrtania za každých okolností, dokonca aj v rizikových oblastiach, a zaisťujú prácu bez stresu. Ručným odstránením úzkych dorazov je možná korekcia hĺbky až 1,5 mm. Na rozdiel od univerzálnych vrtákov s laserovým značením má každá dĺžka implantátu vlastný vrták v príslušnom priemere.



	2.0	3.3	3.8	4.1	4.5	5.5	
Zavádzač (Pilot/Counter)							
Dĺžka	Art.-Nr. SV270	Art.-Nr. SV330	Art.-Nr. SV380	Art.-Nr. SV410	Art.-Nr. TV450	Art.-Nr. TV550	Cena/Kus 69,90 E
Vrták s dorazom (Drills)							
10,0 mm	SB2010	SB33010	TB38010	TB41010	TB45010	TB55010	79,90 E
11,5 mm	SB2011	SB33011	TB38011	TB41011	TB45011	TB55011	79,90 E
13,0 mm	SB2013	SB33013	TB38013	TB41013	TB45013	TB55013	79,90 E
14,5 mm	SB2014	SB33014	TB38014	TB41014	TB45014	-	79,90 E
Rezanie závitů (Tap)							
	-	SG330	TG380	TG410	TG450	TG550	69,90 E
8 mm hĺbkové doraz (použiteľné s 10 mm vrtákom)							
	STOP200.8	STOP330.8	STOP380.8	STOP410.8	STOP450.8	STOP550.8	10,00 E

Inštrumentárium

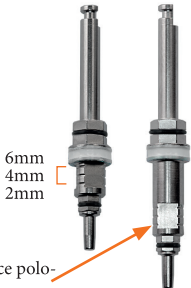		3.3	3.8 4.1	4.5	5.5	
Zavádzač implantátu						
Odčítanie výšky dasien 6mm 4mm 2mm		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Cena/Kus
		krátky INS330-S INS330-L	dlhý INS3841-S INS3841-L	INS450-S INS450-L	INS550-S INS550-L	69,90 E 69,90 E
Plochy označujúce polohu HĚXU						



Vkladací nástroj

pre mini implantáty a guľové nadstavby a DAAS

Art.-Nr. INS270-KUG 69,90 E /Kus



Ručný kľúč

pre chirurgické inštrumenty

Art.-Nr. INS003 69,90 E /Kus



Predĺženie račne

Art.-Nr. INS006 69,90 E /Kus



Predĺženie račne

Art.-Nr. INS002 69,90 E /Kus



Paralelizačný PIN 4 kusy

Art.-Nr. INS001 35,00 E /4 Kusy



Račnový imbusový kľúč

69,90 E /Kus

extra krátky (14,0 mm) Art.-Nr. INS030

krátky (18,5 mm) Art.-Nr. INS013

dlhý (26,5 mm) Art.-Nr. INS014



Imbusový kľúč do mikromotora

69,90 E /Kus

krátky (20,5 mm) Art.-Nr. INS027

dlhý (25,5 mm) Art.-Nr. INS028



Vložka račne

pre LoPat

69,90 E /Kus

štandard (18,5 mm) Art.-Nr. INS029

Ručný skrutkovač

69,90 E /Kus

extra krátky (10,0 mm) Art.-Nr. INS025

krátky (23,5 mm) Art.-Nr. INS004

dlhý (31,5 mm) Art.-Nr. INS005

Ručný skrutkovač, dlhý



Ručný skrutkovač, krátky



Ručný skrutkovač, extra krátky



Inštrumentárium



Momentové kľúče*

Art.-Nr.: RATSCHKE 225,00 E /kus



LoPat-Tool

Art.-Nr.: LOPAT-TOOL 69,90 E /kus

Protetická súprava

Obsah: momentové sety, skrutkovač krátky, imbusové sety krátky, imbusový set dlhý

Art.-Nr.: KIT-P 295,00 E /kus



Protetická súprava

Súprava na minimplantáty




Súprava na minimplantáty

Obsah: Skrutkovitý vrták Safety Stop v dĺžkach 10,0 mm, 11,5 mm a 13,0 mm, protivrták / záhlbník Ø 2,0 mm, paralelný kolík (4 kusy), nástroj na zasúvanie guľovej hlavy.

Art.-Nr.: Kit-Mini 295,00 E/kus

ImProv® Implantat-Zement

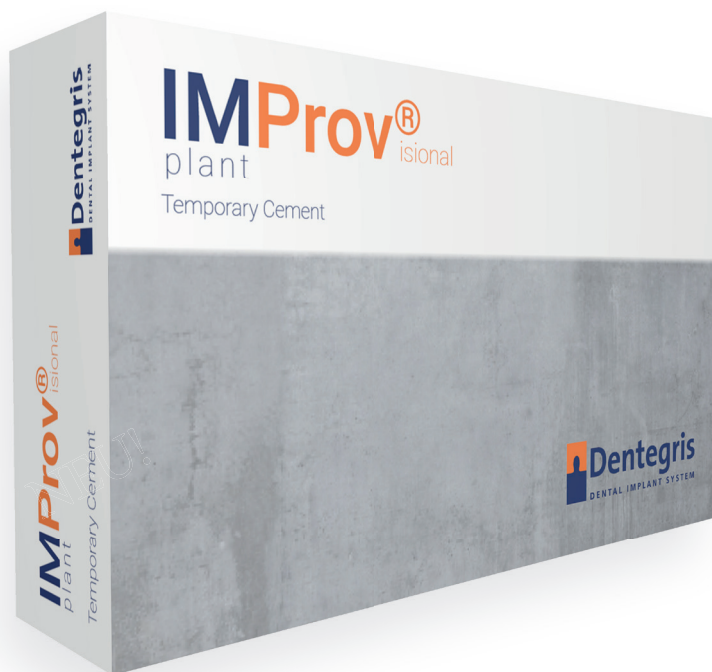

ImProv® Implantat-Zement



Striekačka s dvojitým piestom



Miešacie kanily-hroty

ImProv® je cement bez obsahu eugenolu na báze akrylového uretánu, ktorý bol špeciálne vyvinutý na cementovanie náhrad podporovacích implantátmi. Dokonale vyvážené adhézne vlastnosti zaisťujú vynikajúcu priľnavosť nastavby. ImProv® neprilne k mäkkému tkanivu, takže prebytok sa dá ľahko a rýchlo odstrániť. Jednoduchá manipulácia, ktorú poskytujú dvojpiestové injekčné striekačky, umožňuje ekonomickú aplikáciu, a preto je pre používateľa oveľa hospodárnejšia. Balenie sa dodáva s dvomi dvojitémi piestovými striekačkami a 12 miešacími hrotmi.

ImProv® Implantat-Zement

Art.-Nr. 4400	99,00 E
---------------	---------

Náhradné miešacie hroty 25ks

Art.-Nr. 5500	19,90 E
---------------	---------

Aspeo zberač kostí

Zberač kostí vo forme injekčnej striekačky pre dokonalú manipuláciu. Predná kanyla je uhlová, otočná a odnímateľná.

- Ekonomická a dlhodobá investícia (nástroj vyrobený zo 100% nehrdzavejúcej ocele, vymieňa sa iba filter)
- Ekonomické jednorazové filtre (filtre sú jednotlivo sterilne balené)
- Zberač kostí Aspeo je možné rozobrať v priebehu niekoľkých sekúnd kvôli sterilizácii.

Zberač kostí vrátane 3 sterilných jednorazových filtrov

Art.-Nr. 12010	249,95 E
----------------	----------

12 sterilných jednorazových filtrov

Art.-Nr. 12012	89,95 E
----------------	---------

6 sterilných jednorazových filtrov

Art.-Nr. 12006	59,95 E
----------------	---------



Zberač kostí



Jednorazový filter

Operačné systémy NSK Surgic Pro / Surgic Pro +

ROZHODNUTIE PROFILOV

NSK využila všetky svoje schopnosti na ďalšie zlepšenie výkonu, ktorý si vyžaduje dentálna implantológia. Ešte menší, ešte ľahší a zároveň ešte silnejší: taký je náš ďalej vyvinutý systém Surgic Pro. So všetkými svojimi funkciami a výkonnými rezervami je odpoveďou na vysoké nároky profesionálov v praxi.

Surgic Pro⁺ kompletný set so zálohou dát

Art.-Nr. Y1003585

obsah :


- Riadiaca jednotka s dátovou pamäťou
- Mikromotor SGL70M s LED
- Nožný ovládač FC-78
- Svetelné koleno X-DSG20L (zníženie 20:1)
- Hadice chladiacej kvapaliny (5 kusov) a ďalšie príslušenstvo

Surgic Pro kompletný set bez zálohovania dát

Art.-Nr. Y1003586

obsah :

- Riadiaca jednotka bez dátovej pamäte
- Mikromotor SGL70M s LED
- Nožný ovládač FC-78
- Svetelný kolénkový uholník X-SG20L (zmenšenie 20:1)
- Hadice chladiacej kvapaliny (5 kusov) a ďalšie príslušenstvo

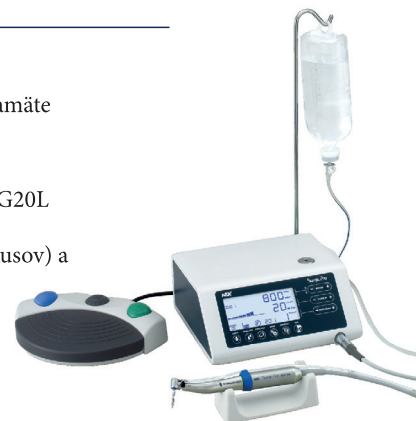

Chirurgické motory Bien Air

S cieľom ponúknuť vám a vašim pacientom maximálny komfort, spoločnosť Bien-Air vyvinula vysokovýkonné systémy, ktoré nenechávajú nič na náhodu. Implantologické systémy iChiropro a Chiropro od Bien-Air ponúkajú pohodlie, výkon a všestrannosť.



	iChiropro	Chiropro 3 rd Gen	Chiropro PLUS 3 rd Gen
Implantologický módus	P	P	P
Operačný mód	P	-	P
Otočný gombík (možno sterilizovať)	-	P	P
Integrované chirurgické protokoly	P	-	-
Informácie pre riadenú chirurgiu	P	-	-
Digitálny pracovný tok (údaje z plánovacieho softvéru)	P	-	-
Exportovateľná chirurgická správa	P	-	-
Maximálny krútiaci moment rotačného nástroja	70 Ncm	70 Ncm	80 Ncm
Rozmery (D x Š x V)	242mm x 244mm x 102mm	240mm x 240mm x 102mm	240mm x 240mm x 102mm
Hmotnosť	2,8 Kg	2,2 Kg	2,2 Kg
Záruka na zariadenie	2 roky	2 roky	2 roky
Špecifikácie MX-i	MX-i LED 1600755-001 Selbstkühlend	MX-i LED 1601008-001 Nicht selbstkühlend	MX-i LED 1600755-001 Selbstkühlend
Rozmery mikromotora ø x L	23 x 91mm	23 x 83mm	23 x 91mm
Hmotnosť mikromotora	115g	110g	115g

CAD knižnice

Für Pre konštrukciu jednotlivých pilierov sú k dispozícii nasledujúce knižnice vrátane pokynov na import. Príslušné súbory nájdete v oblasti sťahovania na našej webovej stránke.

Nadstavby na mieru s využitím dát

Pre objednanie jednotlivých nadstavieb nám jednoducho pošlite vašu skonštruovanú nadstavbu vo formáte STL s uvedením oblasti a priemeru implantátu, na emailovú adresu: cadcam@dentegris.de


Individuálne vyrábané nadstavby prostredníctvom doručenia modelu

Chceli by ste dodávku s individuálne vyrobenými nadstavbami. Odoberanie odtlačkov a výroba modelov už prebehla.

Dostanete e-mail od cadcam@dentegris.de s konštrukčným návrhom návrhu nadstavby na schválenie.



Chceli by ste individuálnu nadstavbu? Prediskutujte to so svojím obchodným zástupcom.

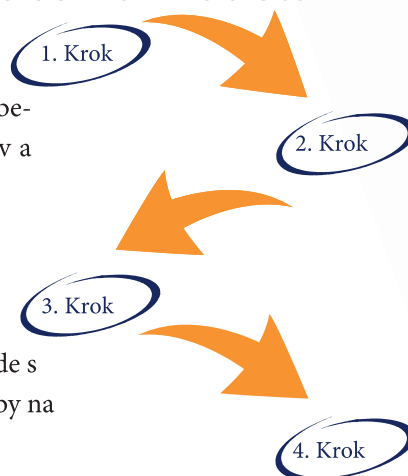

3shape 

Compatible with
exocad

Doručenie na adresu:

Servisné a logistické centrum Dentegris
Kommandturstasse 1
47495 Rheinberg-Orsoy

Po Vašom odsúhlasení nadstavbu (y) vyrobíme a objednávku zašleme späť na Vami zvolenú adresu.

	Cena/Kus prenos dát	Cena/Kus doručenie modelu
Jeden kus - titánová nadstavba	129,-E	159,-E
Nadstavba zo zirkónia	109,-E	139,-E

info@innodentalmedical.com